

DR Universal Single Pump

Réf. art. 200.000.034



La DR Universal Simple Pump a été conçue pour alimenter une zone d'intervention en liquide à une pression spécifique.


L'appareil est destiné à un usage dans le cadre d'interventions d'arthroscopie, d'hystérocopie et d'urologie.

Commandé par une unité de contrôle ou la télécommande DR Universal Simple Pump.

Pour un usage avec tubulures jetables et journalières.

Caractéristiques

- Conçu pour alimenter une zone d'intervention en liquide
- Paramètres sauvegardables
- Fournit une irrigation efficace de la zone d'intervention
- Des signaux sonores et visuels garantissent que les paramètres sont corrects
- Commandé via la télécommande DR Universal Simple Pump
- Ecran grand format et clairement agencé

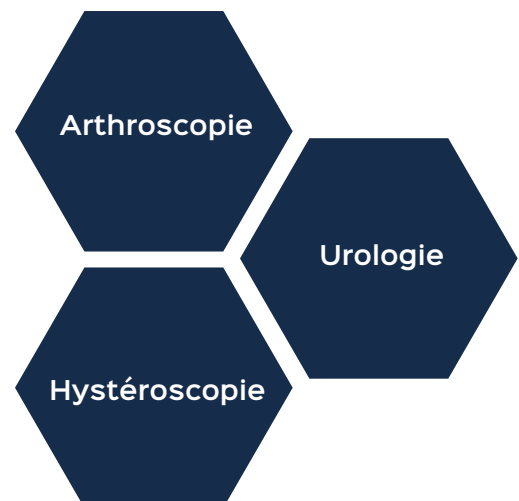

Paramètres techniques

DR Pompe simple universelle

Réf. art. 200.000.034

Voltage	100-240 V AC
Fréquence électrique	50/60Hz
Standard de sécurité boîtier	IP X1
Température ambiante	A l'utilisation: +10°C à +40°C
Durant le stockage ou le transport:	-10°C à +45°C
Dimensions (l x h x p)	330 x 120 x 306 mm
Poids	7,5 kg



DR Tubulures pour la DR pompe simple universelle

Set DR tubulure pour la DR pompe simple universelle. Conçu pour faciliter au personnel médical la préparation de pompes pour une intervention. Deux options disponibles: le DR tubulure à usage unique ou le set DR tubulure ou le set DR tubulure journalière et patient, la solution la plus économique.

DR Tubulure à usage unique

Réf. art. 200.000.044

Installé au contact direct du capteur de l'unité de contrôle de la pompe. L'utilisation du DR tubulure à usage unique nécessite un changement après chaque usage.

Emballage stérile, boîte de 10 pièces



DR Tubulures pour un usage économique, composé de:

DR tubulure journalière

Réf. art. 200.000.036

Installé au contact direct du contrôle de la pompe.

Emballage stérile, boîte de 10 pièces



DR tubulure patient

Réf. art. 200.000.037

Installé au contact direct du DR tubulure journaliere et avec un port d'endoscope.

Emballage stérile, boîte de 50 pièces



DR Télécommande

Réf. art. 200.000.035

La DR télécommande pour la DR pompe simple universelle.

Elle permet le contrôle du flux de liquide et de la pression sans avoir à se tenir près du panneau de commande.



Version001_FR